

illumena™ Néo Système d'administration

Conçu pour allier puissance et performance.

Robuste et fiable

Une réputation bâtie sur la qualité, avec la fonctionnalité et la durabilité de la famille Illumena.

La tolérance de pression permet une utilisation facile et constante avec les microcathéters pendant l'angiographie.

Conception axée sur la sécurité

Le système optionnel d'aide à la détection d'air (ADAWS) identifie une seringue vide ou un bolus d'air.

La tête d'injection affiche le protocole programmé et le volume restant.

La console affiche le protocole programmé, le volume restant ainsi que le volume total injecté.

Un DEL à haute visibilité sur la tête d'injection indique l'état du système.

Polyvalence

Compatible avec les principaux systèmes d'imagerie permettant un contrôle bidirectionnel.

Basculez entre les modes à l'aide d'un seul bouton

Barre de contrôle de remplissage – activation facile à différentes vitesses lors de la rétraction ou l'injection

Compatible avec les seringues certifiées L-F et les seringues pré-remplies*

Commutateur à main et à pédale disponible

Commutateur à main active les protocoles d'injection unique ou multiple

Écran ACL tactile, intuitif et facile à utiliser affichant les informations dont vous avez besoin. Facile à visualiser sous n'importe quel angle ou éclairage



Performance et confiance

Seringues haute pression

Transparentes pour une détection facile de l'air

Conçues et certifiées pour utilisation avec le Illumena Néo



methapharm
Pharmaceutiques Spécialisés


Guerbet | 

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques	Mode Angio: 0.1-40.0 mL/sec Mode CT: 0.1-10.0 mL/sec
Limite de pression	Mode Angio: 75-1200 psi Mode CT: 75-300 psi
Tailles des seringues	Seringues vides de 150 et 200mL
Chauffe seringue (optionel)	Temp. nominale 37°C, minimise la perte de chaleur du produit de contraste préchauffé
Délai d'acquisition (mode CT)	0-300 secondes
Délai d'injection	0-300 secondes
Délai rayons X	0-300 secondes
Rampe de débit	0-10 secondes
Délai entre phases	0-300 secondes
Nombre de phases	4
Nombre de protocoles	99

Là où disponible*

Configurations multiples

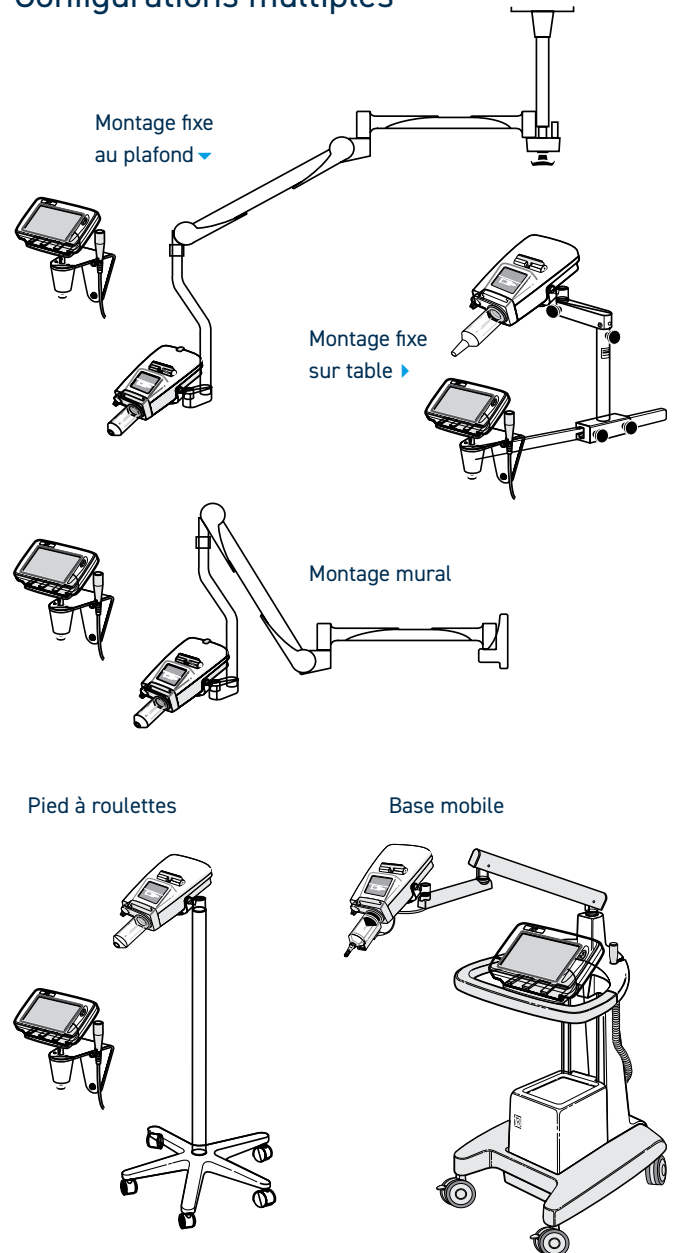

Seringues et raccords

Code	Description	Taille	Pression maximale	Unités/bte
900103B	Seringue Angio avec attache Linden-luer et paille de remplissage	150 mL	1200 psi	50 unités
900103S	Seringue Angio avec attache Linden-luer et perforateur	150 mL	1200 psi	50 unités
900105S	Seringue angio avec perforateur	200 mL	900 psi	50 unités

Guerbet |

Demandes de vente et produits
Tel: 1-800-287-7686
Courriel: sales@methapharm.com

www.methapharm.com

methapharm
Pharmaceutiques Spécialisés

Illumena® Néo - Système d'administration de produit de contraste, est un dispositif médical de Classe II aux États-Unis. Pour obtenir les informations complètes sur les précautions et les conditions d'utilisation optimales de cet appareil, nous vous recommandons de consulter les instructions d'utilisation fournies avec l'appareil ou de contacter votre représentant local Guerbet.

Pour obtenir les informations complètes sur les précautions et les conditions d'utilisation optimales, nous vous recommandons de consulter les instructions d'utilisation fournies avec l'appareil ou de contacter votre représentant local Guerbet.